



# E-NAVI

BioActive

A cânula epidural E-Navi é um dispositivo de infusão para bloqueio por via percutânea

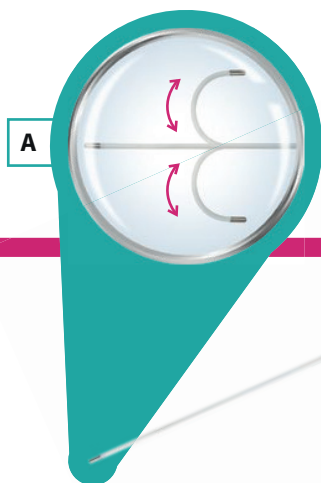

- A** Alavanca de direção dupla.
- B** Trava por botão "Push&Pull".

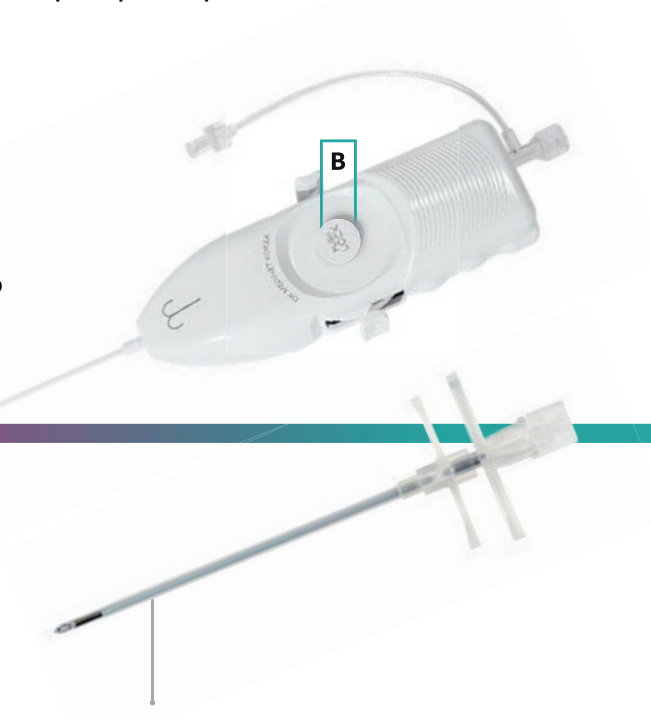

## Introduzidor de Cânula:

Comprimento	Diâmetro
93 mm	Ø 2.8

Produto acompanha o introduzidor\*

## E-NAVI (Cânula):

Modelo	Comprimento	Diâmetro
EN-01	320 mm	Ø1.75
EN-02	320 mm	Ø 2.1

## DIFERENCIAL COMPETITIVO:

- Prevenção do retrocesso de medicamentos.
- Cirurgia minimamente invasiva.
- 01 hora de tratamento.
- 01 dia de procedimento de admissão e alta.

01

### PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O E-NAVI pode se movimentar nas duas direções, para cima e para baixo por meio da alavanca de direção. O introduzidor de cânula faz parte do sistema, tendo a função de perfurar o hiato sacral e servir de guia para a cânula.

02

### ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS

A cânula apresenta as seguintes especificações: Faixa operacional: Quando a alça é puxada, a ponta pode ser dobrada em mais de 40 graus e movida para a parte desejada.

A cânula E-NAVI localiza a região do espaço epidural onde há foco de inflamação e edema, e injeta o medicamento, proporcionando o alívio da dor ao paciente.

03

### INDICAÇÕES

Dor crônica na coluna; síndrome da dor pós-laminectomia; estenose espinal; hérnia de núcleo pulposo; síndrome de falha cirúrgica na coluna; adesiólise epidural; e quando múltiplos bloqueios epidurais já foram realizados, sem sucesso.